


Parametry techniczne

- Moc znamionowa: 24 W
- Napięcie znamionowe: 12 V
- Normy: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie oraz instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia. Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego w instrukcji.

Opis panelu sterowania

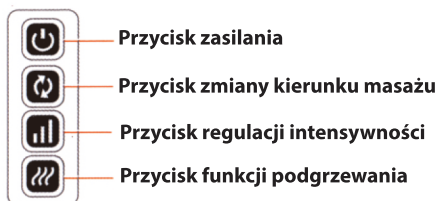

Instrukcja użytkowania

Przygotowanie przed użyciem

1. Ustaw urządzenie na czystej, równej i stabilnej powierzchni.
2. Sprawdź, czy materiałowa osłona na stopy nie jest poluzowana ani uszkodzona.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego 220 V / 50 Hz.
4. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
5. Wsuń stopy do materiałowych osłon urządzenia.

Uwaga: Nie stawaj na urządzeniu podczas jego pracy.

6. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na przewodzie zasilacza, aby uruchomić urządzenie.

Przycisk zasilania

Po podłączeniu zasilacza naciśnij przycisk zasilania.

Urządzenie rozpocznie pracę.

Przycisk zmiany kierunku

Domyślnie urządzenie automatycznie zmienia kierunek masażu co jedną minutę.

- Pierwsze naciśnięcie przycisku uruchamia obrót do przodu.
- Drugie naciśnięcie uruchamia obrót do tyłu.

Regulacja intensywności

Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk regulacji intensywności, aby zmienić siłę masażu.

Dostępne są 3 poziomy intensywności.

Funkcja podgrzewania


- Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję podgrzewania.
- Naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.

Warunki użytkowania

- Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, ani w pobliżu źródeł wody. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrożenia dla użytkownika.
- Nie używaj urządzenia w temperaturze otoczenia przekraczającej 40°C ani w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki czy kucharki.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani nie pozostawiaj go przez dłuższy czas na bezpośrednim słońcu, ponieważ może to uszkodzić powłokę obudowy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Masażer do stóp z funkcją podgrzewania

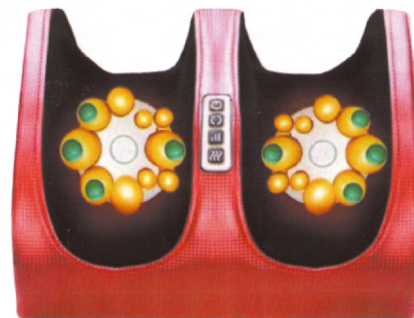

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

- Jeżeli urządzenie zostało przeniesione z zimnego miejsca do ciepłego pomieszczenia, wewnątrz może skroplić się para wodna. Przed uruchomieniem pozostaw urządzenie w temperaturze pokojowej przez około 1 godzinę.

Ostrzeżenia

1. Po zakończeniu użytkowania oraz przed czyszczeniem zawsze odłącz wtyczkę zasilania.
2. Nie używaj urządzenia podczas snu. Długotrwały masaż jednego miejsca może być szkodliwy dla zdrowia.
3. Nie korzystaj z masażera w ciągu 30 minut po posiłku, ponieważ może to powodować dyskomfort.
4. W przypadku wystąpienia bólu lub nadmiernego dyskomfortu natychmiast przerwij użytkowanie.
5. Dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
6. Kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na schorzenia kręgosłupa, ostre stany chorobowe, choroby serca lub inne poważne dolegliwości powinny korzystać z urządzenia wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
7. Po zakończeniu masażu zaleca się wypicie około 50 ml ciepłej przegotowanej wody lub gorącej herbaty, aby wspomóc usuwanie produktów przemiany materii.
8. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Nie wolno samodzielnie wymieniać przewodu na nieoryginalny.
9. Podczas pracy powierzchnia urządzenia może się nagrzewać. Osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie samoczynnie zatrzymuje się podczas pracy	• Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona. • Jeżeli zakończył się zaprogramowany czas pracy, uruchom urządzenie ponownie. • Jeśli silnik uległ przegrzaniu wskutek długotrwałej pracy, wyłącz urządzenie i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
Masaż stał się wolniejszy i pojawiły się nietypowe dźwięki	• Rozluźnij stopy, aby zmniejszyć obciążenie urządzenia. • Nie stawaj na urządzeniu.
Urządzenie pracuje głośniejsze niż zwykle	• W przypadku nowego urządzenia jest to normalne podczas okresu docierania. • Możliwe jest poluzowanie elementów wewnętrznych – w takim przypadku należy przekazać urządzenie do serwisu.
Z wnętrza urządzenia wydobywa się nietypowy zapach lub dym	Natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz urządzenie od zasilania i przekaż je do autoryzowanego serwisu