

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Silikonowa maska LED do pielęgnacji twarzy

Opis produktu

1. Wspomaganie pielęgnacji skóry

Maska LED może być stosowana jako urządzenie wspomagające produkcję kolagenu. Światło LED pomaga zwiększyć wchłanianie składników aktywnych zawartych w kosmetykach pielęgnacyjnych, dzięki czemu skóra staje się bardziej gładka, jędrna, elastyczna oraz wygląda na jaśniejszą i lepiej nawilżoną.

2. Odpowiednia dla skóry tłustej

Urządzenie szczególnie dobrze sprawdza się w pielęgnacji skóry tłustej. Pomaga regulować wydzielanie sebum, wspiera utrzymanie równowagi skóry oraz ogranicza powstawanie niedoskonałości i trądziku.

Zawartość zestawu



Elastyczna silikonowa maska




Sterownik



Port ładowania USB-C



Osłona oczu

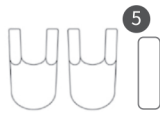


Regulowane paski mocujące

Parametry

- Materiał: silikon + ABS
- Akumulator: 1 × 18650 (wbudowany)
- Napięcie wejściowe: DC 5 V
- Pojemność akumulatora: 1200 mAh
- Moc: 7,4 W
- Czas ładowania: 3-4 godziny
- Czas pracy: około 70-90 minut
- Światło niebieskie: długość fali 440-450 nm
- Światło żółte: długość fali 550-630 nm
- Światło białe: długość fali 440-630 nm
- Światło fioletowe: długość fali 440-630 nm
- Światło zielone: długość fali 540-550 nm
- Światło turkusowe: długość fali 440-550 nm
- Liczba diod LED: 180

Opis sterownika

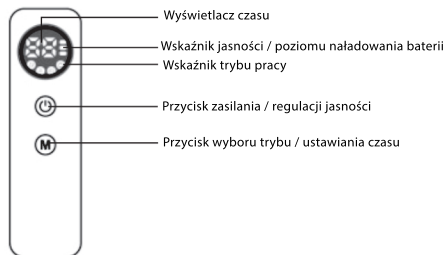

Wyświetlacz czasu

Pozostały czas pracy wyświetlany jest w formie odliczania od ustawionej wartości. Po osiągnięciu 0 minut urządzenie wyłączy się automatycznie.

Wskaźnik jasności / poziomu baterii

Przez pierwsze 3 sekundy po włączeniu wyświetlany jest poziom naładowania akumulatora: 1 dioda – około 30%; 2 diody – około 60%; 3 diody – około 100%. Po upływie 3 sekund wskaźnik pokazuje poziom jasności.

Uwaga: Migający wskaźnik oznacza niski poziom naładowania akumulatora i konieczność jego naładowania.

Tryby pracy

Urządzenie posiada cztery tryby pracy:

- Tryb 1 – światło czerwone (świeci pierwsza kontrolka)
- Tryb 2 – światło niebieskie (świeci druga kontrolka)
- Tryb 3 – światło podczerwone (świeci trzecia kontrolka)
- Tryb 4 – światło fioletowe (świeci czwarta kontrolka)

Przycisk zasilania / regulacji jasności

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Krótkie naciśnięcie zmienia poziom jasności.

Dostępne są 3 poziomy jasności.

Przycisk trybu / ustawiania czasu

- Krótkie naciśnięcie – zmiana trybu pracy.
- Długie naciśnięcie – ustawienie czasu zabiegu.

Dostępne czasy pracy: 5 minut, 10 minut (ustawienie domyślne), 15 minut, 20 minut


KX2393 Maskę LED na twarz 7 kolorów silikonowa timer USB

Producent: KIK Sp. z o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu


<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach

Instrukcja użytkowania

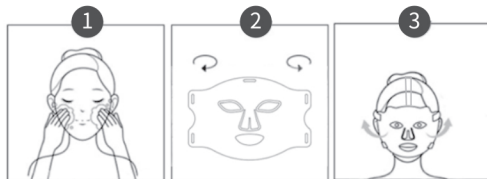

1. Dokładnie oczyść twarz i usuń nadmiar wilgoci.
2. Zamontuj osłonę oczu i przymocuj paski do maski.
3. Załóż maskę na twarz i włącz sterownik.

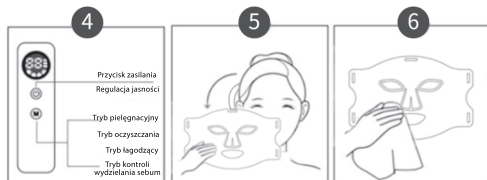

4. Wybierz odpowiedni tryb pracy.
5. Po zakończeniu zabiegu zdejmij maskę i wykonaj standardową pielęgnację twarzy.
6. Przetrzyj silikonową powierzchnię maski.

Uwagi

1. Po zakończeniu zabiegu przetrzyj silikonową część urządzenia miękkim ręcznikiem lub wilgotną chusteczką. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu, a następnie przechowuj w woreczku ochronnym.
2. Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą.
3. Zaleca się stosowanie urządzenia 3-5 razy w tygodniu przez 4 kolejne tygodnie.
4. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Przeciwwskazania	Z produktu nie powinny korzystać: 1. Kobiety w ciąży i karmiące piersią. 2. Osoby z nadwrażliwością na światło lub przyjmujące leki powodujące nadwrażliwość na światło. 3. Osoby cierpiące na dziedziczne choroby oczu lub choroby skóry (np. toczень rumieniowaty, wyprysk fotouczuleniowy, albinizm i inne schorzenia związane z nadwrażliwością na światło).
Instrukcja ładowania	1. Produkt wyposażony jest we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Urządzenie nie może pracować podczas ładowania. 2. Podczas ładowania wskaźnik jasności miga. Po zakończeniu ładowania wszystkie trzy wskaźniki świecą światłem ciągłym.

Test wrażliwości

Przed pierwszym użyciem wykonaj test światłoczułości.

Krok 1	Przyłóż urządzenie do przedramienia i włącz je na 10 minut. Jeżeli pojawi się zaczerwienienie, swędzenie lub inne objawy świadczące o nadwrażliwości na światło, natychmiast przerwij używanie urządzenia. Jeżeli objawy utrzymują się, skontaktuj się z dermatologiem.
Krok 2	Przed zabiegami dokładnie oczyść twarz i pozostaw ją całkowicie suchą. Nie wykonuj zabiegu na skórze pokrytej makijażem ani kosmetykami mogącymi zawierać składniki światłoczułujące.
Krok 3	Po zakończeniu zabiegu może wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry. Jest to naturalna reakcja, która zwykle ustępuje w ciągu około godziny. Jeżeli podczas zabiegu pojawi się pieczenie lub inny dyskomfort, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.

Sposób użycia

Krok 1	Dokładnie oczyść twarz.
Krok 2	Przymocuj paski do maski, załóż ją na twarz, dopasuj długość pasków i zapnij je. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na sterowniku, aby uruchomić urządzenie.
Krok 3	Wybierz odpowiedni tryb pracy zgodnie z potrzebami skóry. Po włączeniu urządzenie domyślnie pracuje z najniższym poziomem jasności. Jasność można regulować przyciskiem regulacji. Jeżeli wskaźnik jasności zacznie migać, oznacza to niski poziom naładowania akumulatora i konieczność jego naładowania.
Krok 4	Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie. Zdejmij maskę i kontynuuj codzienną pielęgnację skóry.
Krok 5	Zaleca się stosowanie urządzenia 3-5 razy w tygodniu przez 4 kolejne tygodnie, co stanowi jeden pełny cykl pielęgnacyjny.