

Środki ostrożności

1. Nie uruchamiaj masażera bez wody. Włączenie urządzenia bez napełnienia go wodą może spowodować jego uszkodzenie.
2. Nie stawaj na masażerze do stóp. Wodę należy wylewać wyłącznie z tej strony urządzenia, która znajduje się po przeciwnej stronie przewodu zasilającego. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie przechowuj go z wodą wewnątrz.
3. Nie umieszczaj przedmiotów magnetycznych w pobliżu masażera, aby zapobiec ich namagnesowaniu.
4. Jeśli używasz soli, ziół lub proszków do kąpieli stóp, umieść je w woreczku z gazy, aby zapobiec zatkaniu filtra.
5. Z produktu nie powinny korzystać osoby z zaburzeniami czucia lub całkowitą utratą czucia w jakiegokolwiek części ciała, a w szczególności osoby z ropniami, stanami zapalnymi skóry lub otwartymi ranami na stopach.
6. W przypadku chorób lub problemów zdrowotnych, takich jak rozrusznik serca, ciąża, nowotwory, infekcje, złamania lub przewlekły ból, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
7. Nie naprawiaj ani nie wymieniaj elementów urządzenia samodzielnie. W celu naprawy lub wymiany skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
8. Produkt objęty jest gwarancją na wady wynikające z jakości wykonania. Jeżeli urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją i nie było wcześniej naprawiane, reklamację należy zgłosić wraz z dowodem zakupu w autoryzowanym punkcie serwisowym.
9. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz wyciek płynu z jego wnętrza.

KX2394 Masażer do stóp wodny składany
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu
<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>
Wyprodukowano w Chinach

Masażer do stóp wodny składany Instrukcja obsługi



Charakterystyka produktu

- Składana, kompaktowa konstrukcja
- Automatyczne podgrzewanie wody
- Terapia magnetyczna
- Masaż rolkowy
- Masaż bąbelkowy
- Fizjoterapia z wykorzystaniem światła czerwonego
- Rolki masujące




Opis produktu

Urządzenie przeznaczone jest do domowych kąpieli stóp. Wyposażone zostało w funkcję podgrzewania wody oraz dodatkowy masaż wspomagający relaks. Dzięki zastosowaniu światła czerwonego wspiera pielęgnację i odprężenie stóp.

Budowa urządzenia

Model produktu przedstawiony na ilustracjach ma charakter poglądowy. Obowiązuje rzeczywisty model produktu.

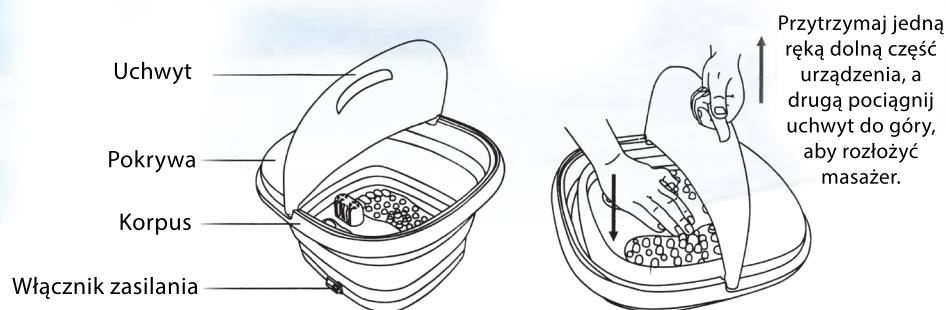

1. Otwórz opakowanie, wyjmij urządzenie, przytrzymaj jego dolną część i pociągnij uchwyt do góry, aby je rozłożyć.
2. Przed włączeniem urządzenia nalej wodę do zbiornika. Można używać zimnej lub ciepłej wody, jednak jej temperatura nie może przekraczać 40°C. Nie używaj wrzątku ani bardzo gorącej wody, ponieważ może zadziałać zabezpieczenie przed przegrzaniem, uniemożliwiając prawidłową pracę urządzenia.
3. Włącz urządzenie i poczekaj, aż woda osiągnie odpowiednią temperaturę. Następnie włóż stopy do masażera.
4. Urządzenie wyposażone jest w system zabezpieczenia temperaturowego. Gdy temperatura wody osiągnie około 55°C, funkcja grzania zostanie automatycznie wyłączona. Po obniżeniu temperatury ogrzewanie zostanie ponownie uruchomione automatycznie. Możesz również wyłączyć ogrzewanie po osiągnięciu pożądanej temperatury i ponownie je włączyć, gdy woda ostygnie.

Funkcje urządzenia

1. Automatyczne podgrzewanie i utrzymywanie temperatury

Masażer wykorzystuje energooszczędny element grzewczy PTC, który szybko podgrzewa wodę do około 42°C i automatycznie utrzymuje komfortową temperaturę przez cały czas użytkowania.

2. Masaż bąbelkowy

System napowietrzania wytwarza dużą liczbę pęcherzyków powietrza, które masują podeszwę stóp, pobudzają punkty refleksologiczne oraz wspomagają krążenie krwi.

3. Masaż dwoma rolkami

Podczas kąpieli stóp można jednocześnie przesuwając stopy po rolkach masujących. Masaż pomaga:

- rozluźnić napięte mięśnie,
- poprawić krążenie,
- pobudzić metabolizm.

4. Terapia magnetyczna

Masażer wyposażony jest w magnesy trwałe tworzące pole magnetyczne oddziałujące na punkty refleksologiczne stóp, wspomagając efekt relaksacyjny i pielęgnacyjny.

5. Terapia podczerwienią

Światło podczerwone wspomaga:

- rozluźnienie mięśni,
- poprawę krążenia krwi,
- pobudzenie metabolizmu.

Parametry techniczne

- Zasilanie pilota: bateria guzikowa × 1 (w zestawie)
- Materiał: PP + TPR
- Akcesoria: masażer do stóp, pilot zdalnego sterowania, zasilacz z wtyczką europejską
- Napięcie zasilania: 220 V
- Moc: 500 W
- Czas pracy: około 30 minut (z możliwością regulacji)
- Maksymalna pojemność wody: 5 l
- Czas ładowania: 120 minut